



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

20.06.2019 № 014-1537/19

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О новых данных по безопасности  
медицинских изделий,  
регистрационные удостоверения  
№ФСЗ 2012/12015  
№РЗН 2016/3956  
№ФСЗ 2011/10034  
№ФСЗ 2012/11503



2306444

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения государственной функции по мониторингу безопасности медицинских изделий, находящихся в обращении на территории Российской Федерации, доводит до сведения субъектов обращения медицинских изделий письмо ООО «ДжиИ Хэлскеа», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия, о новых данных по безопасности при применении медицинских изделий «Монитор пациента В20, В40, с принадлежностями», производства «ДжиИ Медикал Системз Информейшн Технолоджиз, Инк.», США, регистрационное удостоверение от 28.01.2016 № ФСЗ 2012/12015, срок действия не ограничен; «Монитор пациента Carescape В450 с принадлежностями», производства «ДжиИ Хэлскеа Финланд Ой», Финляндия, регистрационное удостоверение от 15.04.2016 № РЗН 2016/3956, срок действия не ограничен; «Монитор пациента CARESCAPE В650 с принадлежностями», производства «ДжиИ Хэлскеа Финланд Ой», Финляндия, регистрационное удостоверение от 15.05.2019 № ФСЗ 2011/10034, срок действия не ограничен; «Монитор пациента CARESCAPE В850 с принадлежностями», производства «ДжиИ Хэлскеа Финланд Ой», Финляндия, регистрационное удостоверение от 14.12.2018 № ФСЗ 2012/11503, срок действия не ограничен.

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в ООО «ДжиИ Хэлскеа» (123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, 10С, 12 этаж, тел. +7(495) 7396931).

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



## СРОЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

3000 N. Grandview Blvd. - W440  
Waukesha, WI 53188  
США

GE Healthcare ссылка: FMI 39001-ROW

28 мая 2019 г.

Кому: Администраторам медицинских учреждений/специалистам по управлению рисками  
Руководителям сестринских служб  
Руководителям отделов биомедицинской техники

Тема: **Магистральные кабели и подводящие провода ЭКГ - Потенциальное уменьшение подачи энергии во время выполнения дефибрилляции**

**Этот документ содержит важную информацию о вашем изделии. Проследите за тем, чтобы все потенциальные пользователи в вашем учреждении были ознакомлены с этим предупреждением и рекомендуемыми действиями. Сохраните этот документ в вашем архиве.**

**Проблема безопасности** Магистральные кабели и подводящие провода ЭКГ могут понижать количество энергии, доходящей до пациента во время выполнения дефибрилляции, тем самым потенциально ограничивая успешность восстановления сердечного ритма пациента. Если эта проблема возникнет во время проведения дефибрилляции, это может быть незаметно для лица, оказывающего помощь, и может спровоцировать неблагоприятный исход для пациента. Мы не получали сообщений о нанесении вреда здоровью вследствие этой проблемы.

**Инструкции по безопасности** Затронутые этой проблемой магистральные кабели и подводящие провода ЭКГ можно продолжать использовать только для мониторинга. Прекратите использование дефектных магистральных кабелей и подводящих проводов ЭКГ для пациентов в случаях, когда можно предположить появление аритмии, которая потребует выполнения дефибрилляции, и используйте для этих пациентов не затронутые этой проблемой магистральные кабели и подводящие провода ЭКГ.

Если при использовании затронутых этой проблемой магистральных кабелей и подводящих проводов ЭКГ только для мониторинга неожиданно окажется, что необходимо выполнение дефибрилляции, следуйте приведенным ниже инструкциям:



- 1) Отсоедините ВСЕ подводящие ЭКГ от пациента.
- 2) Выполняйте дефибрилляцию пациента согласно больничному протоколу.
- 3) Если сердечный ритм пациента можно контролировать с помощью подводящих проводов или электродов ЭКГ дефибриллятора, то так и делайте. Если это невозможно, заново подключите подводящие провода ЭКГ после выполнения дефибрилляции для восстановления сердечного ритма пациента.

**Информация о неисправной продукции** Список затронутых проблемой магистральных кабелей ЭКГ см. в [Приложении А](#), список затронутых проблемой подводящих проводов ЭКГ см. в [Приложении В](#). Магистральные кабели и подводящие провода ЭКГ можно использовать для мониторов пациентов, в катетеризационных лабораториях и вместе с ультразвуковым оборудованием.

См. Рисунки 1 и 2 ниже, чтобы узнать, где находится REF (код товара)/номер по каталогу и номер GTIN (ГНПТ) на кабелях и упаковке.

**Рисунок 1:** Местонахождение REF/номера по каталогу и номера GTIN на затронутых проблемой магистральных кабелях и подводящих проводах.



REF(код товара) / Номер по каталогу

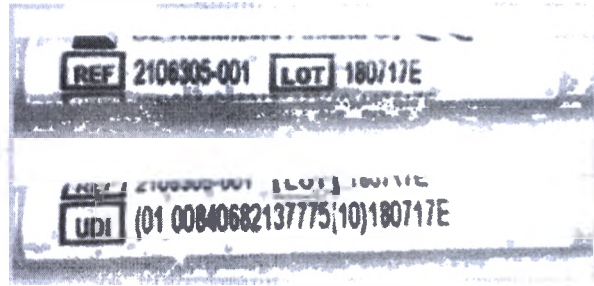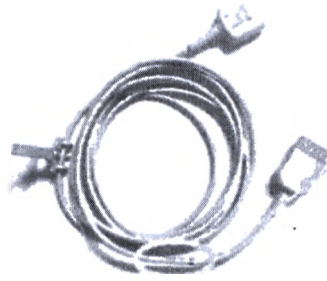

Номер GTIN (ГНПТ)

**Рисунок 2:** Местонахождение REF/номера по каталогу и номера GTIN (ГНПТ) на затронутых проблемой магистральных кабелях и подводящих проводах.

Упаковка с магистральными кабелями и подводящими проводами ЭКГ REF/ номер по каталогу (обозначение на упаковке)

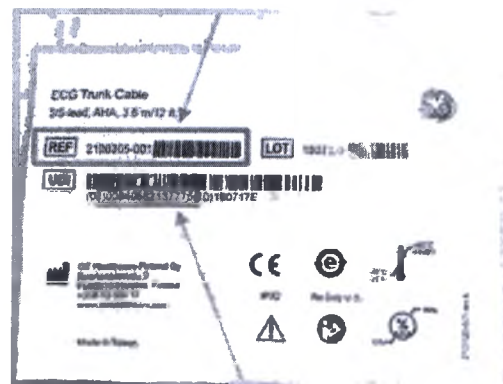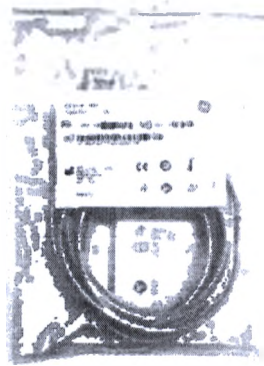

Номер GTIN (ГНПТ)

**Примечание: Идентификация не затронутых проблемой изделий:**

Некоторые из магистральных кабелей и подводящих проводов ЭКГ, поставка которых осуществлялась начиная с апреля 2019 г., были проверены GE Healthcare перед поставкой, и эта проблема их не касается. Приведенные выше инструкции по технике безопасности не распространяются на эти не затронутые проблемой изделия, и их можно использовать во время выполнения дефибрилляции.

На них имеется дополнительная идентификация, чтобы их можно было отличить от изделий, которых касается данное исправление.

- 1) На не затронутых проблемой магистральных кабелях и подводящих проводах ЭКГ имеется обозначение тремя звездочками на обертке для указания того, что они проверены и данное исправление их не касается.

**Не затронутые проблемой магистральные кабели и подводящие провода ЭКГ**



- 2) Не затронутые проблемой магистральные кабели и подводящие провода ЭКГ со стикером в виде зеленого кружочка на упаковке проверены, и их не касается данное исправление.

**Не затронутые проблемой упакованные магистральные кабели и подводящие провода ЭКГ**



**Исправление  
продукта**

Компания GE Healthcare бесплатно заменит все затронутые проблемой магистральные кабели и подводящие провода. Заполните и верните прилагаемый бланк "Ответ клиента" по электронной почте по адресу [Recall39001.ECGCable@ge.com](mailto:Recall39001.ECGCable@ge.com), и GE Healthcare бесплатно предоставит вам детали на замену.

**Контактная  
информация**

Если у Вас возникли вопросы по данному Сообщению о безопасности или относительно неисправностей, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю GE Healthcare по сервису/продажам.  
Тел. 8 (800) 333 69 67 (бесплатно по России);  
E-mail: [CISServiceCenter@ge.com](mailto:CISServiceCenter@ge.com)

Заверяем Вас, что поддержание высокого уровня безопасности и качества является нашей первоочередной задачей. Если у Вас есть какие-либо вопросы, обращайтесь к нам незамедлительно.

С уважением,

James W. Dennison  
Vice President - Quality Assurance  
GE Healthcare

Jeff Hersh, PhD MD  
Chief Medical Officer  
GE Healthcare

**ПРИЛОЖЕНИЕ А – Магистральные кабели ЭКГ**

REF (код товара) / № по каталогу	Описание	GTIN (ГНПТ)
2106305-001	Магистральный кабель ЭКГ, 3/5 отведений, АНА, 3,6 м/12 футов.	00840682137775
2106305-002	Магистральный кабель ЭКГ, 3/5 отведений, АНА, 1,2 м/4 фута.	00840682137898
2106305-003	Магистральный кабель ЭКГ, 3/5 отведений, IEC, 3,6 м/12 футов.	00840682137799
2106305-004	Магистральный кабель ЭКГ, 3/5 отведений, IEC, 1,2 м/4 фута.	00840682137720
2106306-001	Магистральный кабель ЭКГ, для новорожденных, DIN 3 отведения, АНА, 3,6 м/12 футов.	00840682137843
2106306-002	Магистральный кабель ЭКГ, для новорожденных, DIN 3 отведения, АНА, 1,2 м/4 фута.	00840682137737
2106306-003	Магистральный кабель ЭКГ, для новорожденных, DIN 3 отведения, IEC, 3,6 м/12 футов.	00840682137690
2106306-004	Магистральный кабель ЭКГ, для новорожденных, DIN 3 отведения, IEC, 1,2 м/4 фута.	00840682137706
2106307-001	Магистральный кабель ЭКГ, 6 отведений, АНА, 3,6 м/12 футов.	00840682137836
2106307-002	Магистральный кабель ЭКГ, 6 отведений, АНА, 1,2 м/4 фута.	00840682137751
2106307-003	Магистральный кабель ЭКГ, 6 отведений, IEC, 3,6 м/12 футов.	00840682137744
2106307-004	Магистральный кабель ЭКГ, 6 отведений, IEC, 1,2 м/4 фута.	00840682137874
2106308-001	Магистральный кабель ЭКГ, 12 отведений, АНА, 3,6 м/12 футов.	00840682137713
2106308-002	Магистральный кабель ЭКГ, 12 отведений, АНА, 1,2 м/4 фута.	00840682137812
2106308-003	Магистральный кабель ЭКГ, 12 отведений, IEC, 3,6 м/12 футов.	00840682137881
2106308-004	Магистральный кабель ЭКГ, 12 отведений, IEC, 1,2 м/4 фута.	00840682137867
2106310-001	Магистральный кабель ЭКГ, 3/5 отведений с фильтром для электрохирургии (ESU), АНА, 3,6 м/12 футов.	00840682137935
2106310-002	Магистральный кабель ЭКГ, 3/5 отведений с фильтром для электрохирургии (ESU), IEC, 3,6 м/12 футов.	00840682137805
2106311-001	Магистральный кабель ЭКГ, 3/5 отведений, АНА, 6 м/20 футов.	00840682137676
2106311-002	Магистральный кабель ЭКГ, 3/5 отведений, IEC, 6 м/20 футов.	00840682137911

## ПРИЛОЖЕНИЕ В - Подводящие провода ЭКГ

### В.1 Комплекты подводящих проводов с зажимами типа "граббер" на концах

REF (код товара) / № по каталогу	Описание	GTIN (ГНПТ)
2106389-001	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений, сгруппированный, зажим "граббер", АНА, 74 см/ 29 дюймов	00840682139960
2106389-002	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений, сгруппированный, зажим "граббер", АНА, 130 см/ 51 дюйм	00840682139779
2106389-003	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений, сгруппированный, зажим "граббер", ИЕС, 74 см/ 29 дюймов	00840682139700
2106389-004	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений, сгруппированный, зажим "граббер", ИЕС, 130 см/ 51 дюйм	00840682140089
2106389-005	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений, сгруппированный, зажим "граббер", АНА, комбинация 74 см/ 29 дюймов, 130 см/51 дюйм	00840682139786
2106389-006	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений, сгруппированный, зажим "граббер", ИЕС, комбинация 74 см/ 29 дюймов, 130 см/51 дюйм	00840682139984
2106390-001	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 3 отведения, сгруппированный, зажим "граббер", АНА, 74 см/ 29 дюймов	00840682139687
2106390-002	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 3 отведения, зажим "граббер", АНА, 130 см/ 51 дюйм	00840682140232
2106390-003	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 3 отведения, зажим "граббер", ИЕС, 74 см/ 29 дюймов	00840682140058
2106390-004	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 3 отведения, зажим "граббер", ИЕС, 130 см/ 51 дюйм	00840682140317
2106391-001	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений, сгруппированный, зажим "граббер", АНА, 74 см/ 29 дюймов	00840682140799
2106391-002	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений, зажим "граббер", АНА, 130 см/ 51 дюйм	00840682139830
2106391-003	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений, зажим "граббер", ИЕС, 74 см/ 29 дюймов	00840682140003
2106391-004	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений, зажим "граббер", ИЕС, 130 см/ 51 дюйм	00840682139601
2106391-005	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений, зажим "граббер", АНА, комбинация 74 см/ 29 дюймов, 130 см/ 51 дюйм	00840682140348
2106391-006	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений, зажим "граббер", ИЕС, комбинация 74 см/ 29 дюймов, 130 см/51 дюйм	00840682140133
2106393-001	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений V2-6, зажим "граббер", АНА, 130 см/ 51 дюйм	00840682140287
2106393-002	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений C2-6, зажим "граббер", ИЕС, 130 см/ 51 дюйм	00840682139922
2106393-003	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений V2-6, зажим "граббер", АНА, 74 см/ 29 дюймов	00840682139885
2106393-004	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений C2-6, зажим "граббер", ИЕС, 74 см/ 29 дюймов	00840682139823
2106397-001	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 6 отведений, сгруппированный, зажим "граббер", АНА, 74 см/ 29 дюймов	00840682140522
2106397-002	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 6 отведений, сгруппированный, зажим "граббер", АНА, 130 см/ 51 дюйм	00840682140461
2106397-003	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 6 отведений, сгруппированный, зажим "граббер", АНА, комбинация 74 см/ 29 дюймов, 130 см/51 дюйм	00840682140041
2106398-001	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 6 отведений, сгруппированный, зажим "граббер", ИЕС, 74 см/ 29 дюймов	00840682140072
2106398-002	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 6 отведений, сгруппированный, зажим "граббер", ИЕС, 130 см/ 51 дюйм	00840682140256
2106398-003	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 6 отведений, сгруппированный, зажим "граббер", ИЕС, комбинация 74 см/ 29 дюймов, 130 см/51 дюйм	00840682139717

*В.2 Сменные подводящие провода с зажимами типа "граббер" на концах*

<b>REF (код товара) / № по каталогу</b>	<b>Описание</b>	<b>GTIN (ГНПТ)</b>
2106388-001	Сменный подводящий провод ЭКГ, зажим "граббер", LL, АНА, 74 см/ 29 дюймов	Н/П
2106388-002	Сменный подводящий провод ЭКГ, зажим "граббер", RA, АНА, 74 см/ 29 дюймов	Н/П
2106388-003	Сменный подводящий провод ЭКГ, зажим "граббер", GRN RL, АНА, 74 см/ 29 дюймов	Н/П
2106388-004	Сменный подводящий провод ЭКГ, зажим "граббер", BLK LA, АНА, 74 см/ 29 дюймов	Н/П
2106388-005	Сменный подводящий провод ЭКГ, зажим "граббер", BRN V, АНА, 74 см/ 29 дюймов	Н/П
2106388-006	Сменный подводящий провод ЭКГ, зажим "граббер", YEL L, IEC, 74 см/ 29 дюймов	Н/П
2106388-007	Сменный подводящий провод ЭКГ, зажим "граббер", BLK N, IEC, 74 см/ 29 дюймов	Н/П
2106388-008	Сменный подводящий провод ЭКГ, зажим "граббер", RED R, IEC, 74 см/ 29 дюймов	Н/П
2106388-009	Сменный подводящий провод ЭКГ, зажим "граббер", GRN F, IEC, 74 см/ 29 дюймов	Н/П
2106388-010	Сменный подводящий провод ЭКГ, зажим "граббер", WHT C, IEC, 74 см/ 29 дюймов	Н/П
2106388-101	Сменный подводящий провод ЭКГ, зажим "граббер", LL, АНА, 130 см/ 51 дюйм	Н/П
2106388-102	Сменный подводящий провод ЭКГ, зажим "граббер", RA, АНА, 130 см/ 51 дюйм	Н/П
2106388-103	Сменный подводящий провод ЭКГ, зажим "граббер", GRN RL, АНА, 130 см/ 51 дюйм	Н/П
2106388-104	Сменный подводящий провод ЭКГ, зажим "граббер", BLK LA, АНА, 130 см/ 51 дюйм	Н/П
2106388-105	Сменный подводящий провод ЭКГ, зажим "граббер", BRN V, АНА, 130 см/ 51 дюйм	Н/П
2106388-106	Сменный подводящий провод ЭКГ, зажим "граббер", YEL L, IEC, 130 см/ 51 дюйм	Н/П
2106388-107	Сменный подводящий провод ЭКГ, зажим "граббер", BLK N, IEC, 130 см/ 51 дюйм	Н/П
2106388-108	Сменный подводящий провод ЭКГ, зажим "граббер", RED R, IEC, 130 см/ 51 дюйм	Н/П
2106388-109	Сменный подводящий провод ЭКГ, зажим "граббер", GRN F, IEC, 130 см/ 51 дюйм	Н/П
2106388-110	Сменный подводящий провод ЭКГ, зажим "граббер", WHT C, IEC, 130 см/ 51 дюйм	Н/П
2106392-001	Сменный подводящий провод ЭКГ, зажим "граббер", YEL V, АНА, 74 см/ 29 дюймов	Н/П
2106392-002	Сменный подводящий провод ЭКГ, зажим "граббер", GRN V, АНА, 74 см/ 29 дюймов	Н/П
2106392-003	Сменный подводящий провод ЭКГ, зажим "граббер", BLU V, АНА, 74 см/ 29 дюймов	Н/П
2106392-004	Сменный подводящий провод ЭКГ, зажим "граббер", ORG V, АНА, 74 см/ 29 дюймов	Н/П
2106392-005	Сменный подводящий провод ЭКГ, зажим "граббер", VIO V, АНА, 74 см/ 29 дюймов	Н/П

В.3 Комплекты подводящих проводов с защелками на концах

REF (код товара) / № по каталогу	Описание	GTIN (ГНПТ)
2106381-001	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений, защелка, АНА, 74 см/ 29 дюймов	00840682139953
2106381-002	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений, защелка, АНА, 130 см/ 51 дюйм	00840682140201
2106381-003	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений, защелка, ИЕС, 74 см/ 29 дюймов	00840682139847
2106381-004	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений, защелка, ИЕС, 130 см/ 51 дюйм	00840682139939
2106381-005	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений, защелка, АНА, комбинация 74 см/ 29 дюймов, 130 см/51 дюйм	00840682139854
2106383-001	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений, сгруппированный, защелка, АНА, 74 см/ 29 дюймов	00840682140126
2106383-002	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений, сгруппированный, защелка, АНА, 130 см/ 51 дюйм	00840682140096
2106383-003	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений, сгруппированный, защелка, ИЕС, 74 см/ 29 дюймов	00840682139618
2106383-004	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений, сгруппированный, защелка, ИЕС, 130 см/ 51 дюйм	00840682140171
2106383-005	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений, сгруппированный, защелка, АНА, комбинация 74 см/ 29 дюймов, 130 см/51 дюйм	00840682140034
2106383-006	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений, сгруппированный, защелка, ИЕС, комбинация 74 см/ 29 дюймов, 130 см/51 дюйм	00840682139816
2106385-001	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 3 отведения, защелка, АНА, 74 см/ 29 дюймов	00840682139588
2106385-002	КОМПЛЕКТ ПОДВОДЯЩИХ ПРОВОДОВ ЭКГ, НА 3 ОТВЕДЕНИЯ, СГРУППИРОВАННЫЙ, ЗАЩЕЛКА, АНА, 130 СМ/ 51 ДЮЙМ	00840682140119
2106385-003	КОМПЛЕКТ ПОДВОДЯЩИХ ПРОВОДОВ ЭКГ, НА 3 ОТВЕДЕНИЯ, СГРУППИРОВАННЫЙ, ЗАЩЕЛКА, ИЕС, 74 СМ/ 29 ДЮЙМОВ	00840682139724
2106385-004	КОМПЛЕКТ ПОДВОДЯЩИХ ПРОВОДОВ ЭКГ, НА 3 ОТВЕДЕНИЯ, СГРУППИРОВАННЫЙ, ЗАЩЕЛКА, ИЕС, 130 СМ/ 51 ДЮЙМ	00840682140508
2106394-001	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений V2-6, защелка, АНА, 130 см/ 51 дюйм	00840682139892
2106394-002	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений C2-6, защелка, ИЕС, 130 см/ 51 дюйм	00840682140478
2106394-003	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений V2-6, защелка, АНА, 74 см/ 29 дюймов	00840682140102
2106394-004	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 5 отведений C2-6, защелка, ИЕС, 74 см/ 29 дюймов	00840682140393
2106395-001	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 6 отведений, сгруппированный, защелка, АНА, 74 см/ 29 дюймов	00840682139649
2106395-002	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 6 отведений, сгруппированный, защелка, АНА, 130 см/ 51 дюйм	00840682139656
2106395-003	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 6 отведений, сгруппированный, защелка, АНА, комбинация 74 см/ 29 дюймов, 130 см/51 дюйм	00840682139663
2106396-001	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 6 отведений, сгруппированный, защелка, ИЕС, 74 см/ 29 дюймов	00840682140379
2106396-002	Комплект подводящих проводов ЭКГ, 6 отведений, сгруппированный, защелка, ИЕС, 130 см/ 51 дюйм	00840682140409



В.4 – Сменные подводящие провода ЭКГ с защелками на концах

REF (код товара) / № по каталогу	Описание	GTIN (ГНПТ)
2106386-001	Сменный подводящий провод ЭКГ, защелка, LL, АНА, 74 см/ 29 дюймов	Н/П
2106386-002	Сменный подводящий провод ЭКГ, защелка, RA, АНА, 74 см/ 29 дюймов	Н/П
2106386-003	Сменный подводящий провод ЭКГ, защелка, RL, АНА, 74 см/ 29 дюймов	Н/П
2106386-004	Сменный подводящий провод ЭКГ, защелка, LA, АНА, 74 см/ 29 дюймов	Н/П
2106386-005	Сменный подводящий провод ЭКГ, защелка, M, АНА, 74 см/ 29 дюймов	Н/П
2106386-101	Сменный подводящий провод ЭКГ, защелка, LL, АНА, 130 см/ 51 дюйм	Н/П
2106386 102	Сменный подводящий провод ЭКГ, защелка, RA, АНА, 130 см/ 51 дюйм	Н/П
2106386-103	Сменный подводящий провод ЭКГ, защелка, RL, АНА, 130 см/ 51 дюйм	Н/П
2106386-104	Сменный подводящий провод ЭКГ, защелка, LA, АНА, 130 см/ 51 дюйм	Н/П
2106386-105	Сменный подводящий провод ЭКГ, защелка, V, АНА, 130 см/ 51 дюйм	Н/П



Исх. № GEHC: 39001-ROW

**ПОДТВЕРЖДЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОМ УСТРОЙСТВЕ  
ТРЕБУЕТСЯ ОТВЕТ**

Заполните этот бланк и быстро верните его в компанию GE Healthcare (не позднее, чем через 30 дней после получения). Тем самым вы подтвердите получение и понимание Уведомления об исправлении медицинского устройства, исх. № 39001-ROW.

Имя клиента/получателя: \_\_\_\_\_

Улица и номер дома: \_\_\_\_\_

Город, область, страна, индекс: \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

Номер телефона: \_\_\_\_\_

Мы подтверждаем получение и понимание прилагаемого Уведомления о медицинском устройстве, а также подтверждаем, что приняли и будем принимать надлежащие меры в соответствии с этим Уведомлением.

Укажите ФИО ответственного лица, заполнившего этот бланк.

Подпись: \_\_\_\_\_

ФИО (печатными буквами): \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

Дата (ДД/ММ/ГГГГ): \_\_\_\_\_

Верните заполненный бланк, отсканировав или сфотографировав его и отправив по электронной почте по адресу:

[Recall39001.ECGCable@ge.com](mailto:Recall39001.ECGCable@ge.com)

Вы можете получить этот адрес электронной почты из QR-кода, представленного ниже:

